

Dual-Perfusion-Set for "35" Petri dishes

500-800 516


Dual-Perfusion-Set for 35 mm Petri dishes

consisting of:

cover with glass insert, # 001 197; perfusion ring, # 001 198

2 canal tube inlets, # 501 584; 2 canal tube outlets, # 501 585;

grub screws # 900 093; screwdriver # 900 405

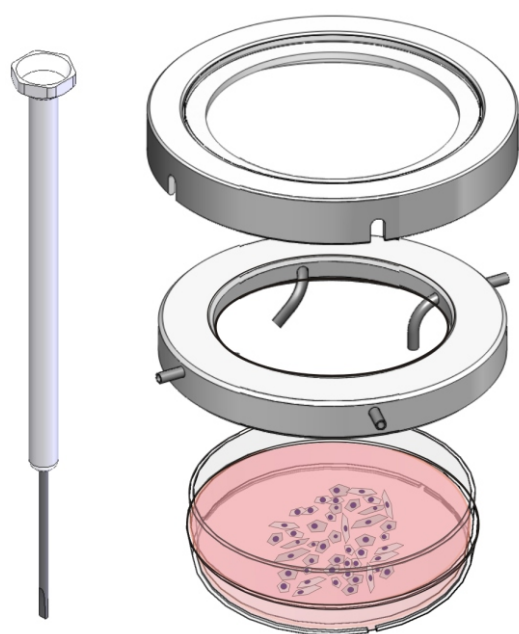

cover with glass insert

perfusion ring

Petri dishes "35"


- stainless steel
- sterilizable
- glass insert
- cut-outs for the canal tubes

- stainless steel
- sterilizable
- lateral openings for the canal tubes
- Screws for the fixation of the canal tubes

- different manufacturer with outer diameter 31.7 - 37.6 mm

Scheme of an "open perfusion"

assembly and procedure of the perfusion

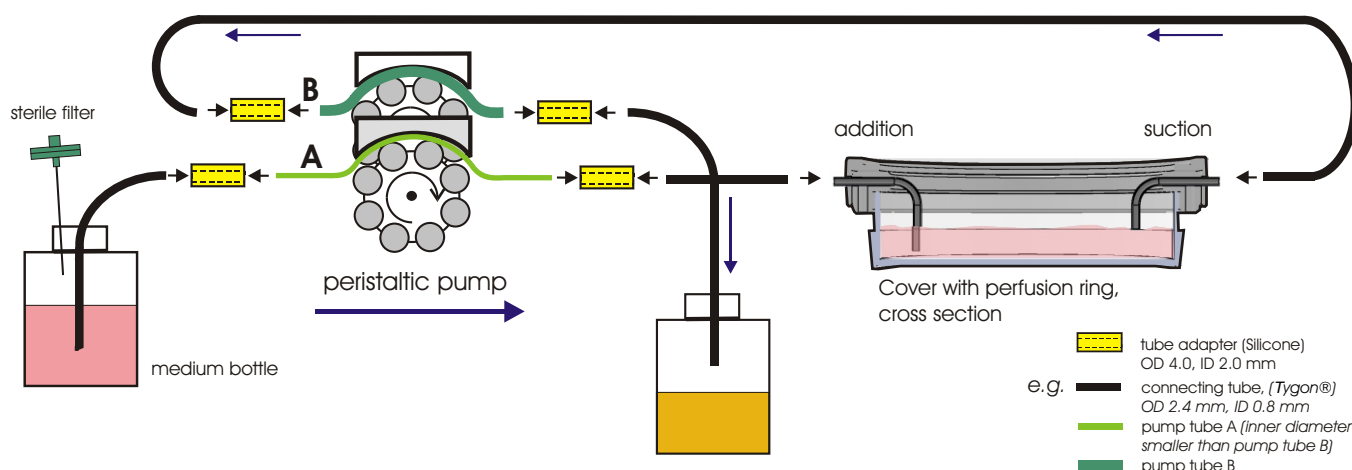


This Perfusion-Set is compatible to a large variety "35" Petri dishes.

Please do not hesitate to contact us regarding a cover with perfusion adapter for other Petri dishes!


Dual-Perfusion-Set for "35" Petri dishes

500-800 516

cover with glass insert

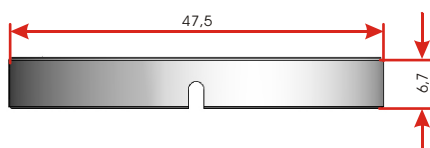


perfusion ring with canal tubes

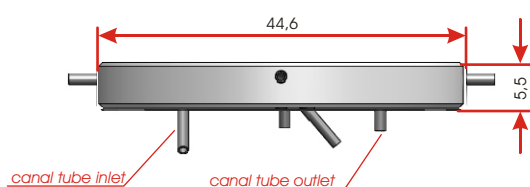


Specifications

perfusion ring with cover - bottom view

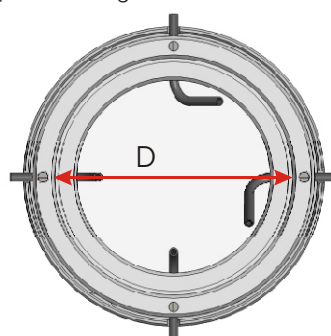

dimensions in mm

- For "35" Petri dishes with an outer diameter of 32.8 mm up to 34.5 mm

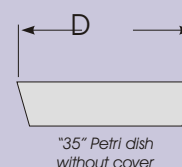


Assembly



- Set the sterilized perfusion ring onto the Petri dish "35"
- Set the cover with glass insert onto the perfusion ring
- Plug the Tygon[®] tubes onto the canal tubes

Application example

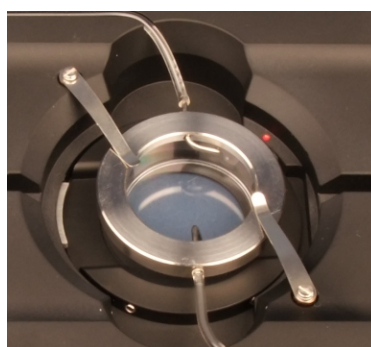

- Petri dish "35" with perfusion ring and cover inserted into the Heating Insert P 2000

This Perfusion-Set is compatible to a large variety "35" Petri dishes.

Please do not hesitate to contact us regarding a cover with perfusion adapter for other Petri dishes!

Zweifach-Perfusions-Set für 35er Petrischalen # 500-800 516

Zweifach-Perfusions-Set für 35er Petrischalen


bestehend aus:

Deckel mit Glaseinsatz, # 001 197; Perfusionsring, # 001 198;

2 Einlasskanülen, # 501 584; 2 Auslasskanülen, # 501 585;

Gewindestifte # 900 093; Schraubendreher # 900 405

Deckel mit Glaseinsatz

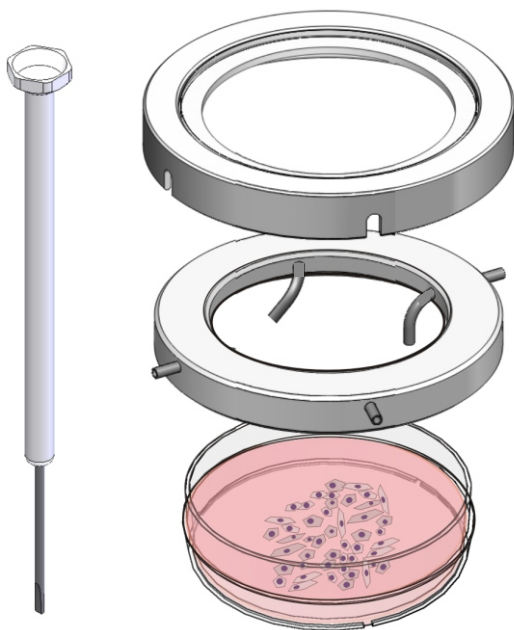

Perfusionsring

Petrischalen “35”


- Edelstahl
- sterilisierbar
- Glaseinsatz
- Ausschnitt für Kanülen

- Edelstahl
- sterilisierbar
- seitliche Öffnungen für Kanülen
- Fixierschrauben für Kanülen

- von verschiedenen Herstellern mit Außendurchmesser 31,7 - 37,6 mm

Schema einer “offenen Perfusion”

Montage und Durchführung der Perfusion

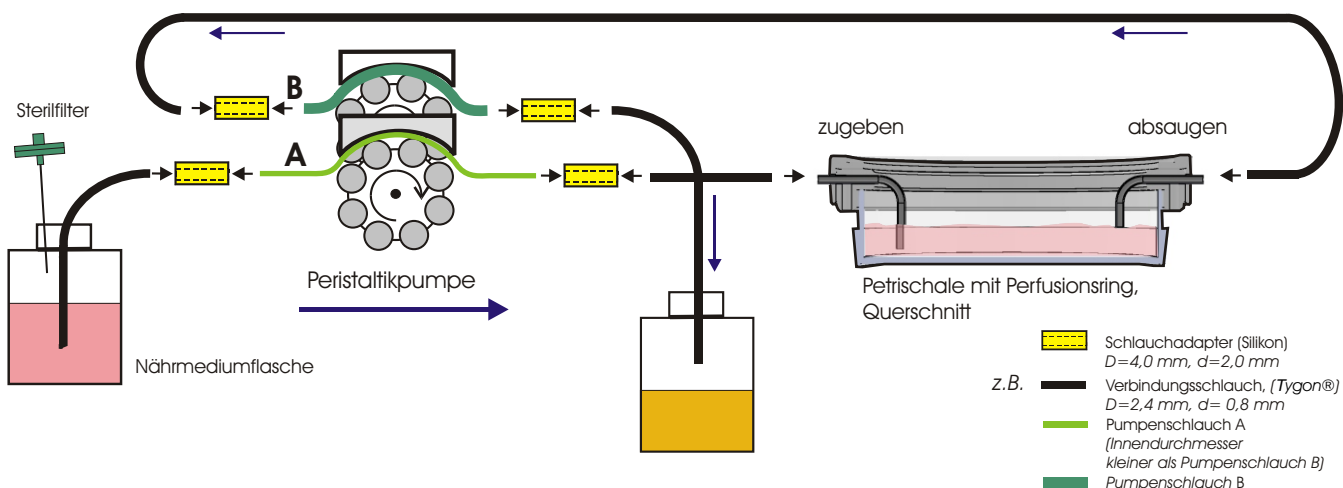


Dieses Perfusions-Set ist für eine Vielzahl von 35er Petrischalen geeignet.

Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich eines Perfusions-Set für andere Petrischalen!


Zweifach-Perfusions-Set für 35er Petrischalen # 500-800 516

Technische Daten


Deckel mit Glaseinsatz

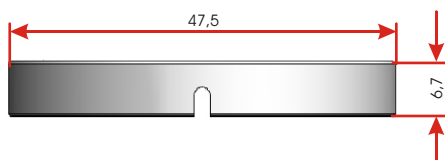

Perfusionsring mit Kanülen

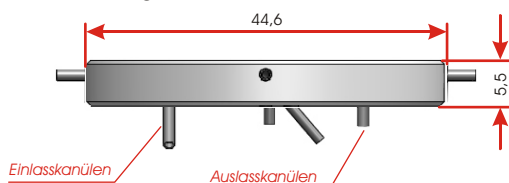


Perfusionsring mit Deckel - Unteransicht

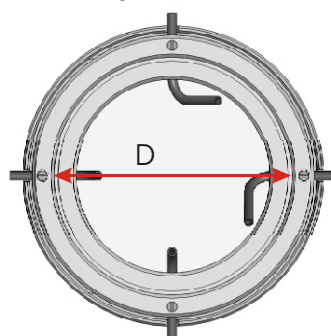

Maße in mm

- Für 35er Petrischalen mit einem Außendurchmesser von 32,8 bis 34,5 mm

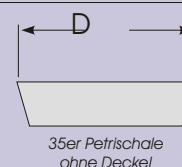


35er Petrischale ohne Deckel

Montage



- Den sterilisierten Perfusionsring auf die 35er Petrischale aufsetzen.
- Den Deckel mit Glaseinsatz auf den Perfusionsring aufsetzen.
- Den Tygon®-Schlauch auf die Kanülen aufstecken.

Anwendungsbeispiel

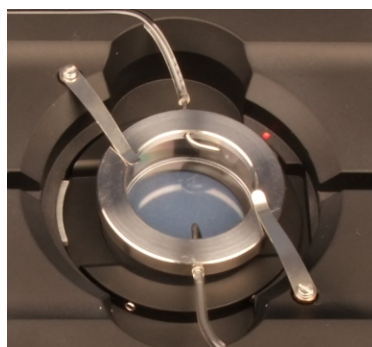

- 35er Petrischale mit aufgesetztem Perfusionsring und Deckel im Heizeinsatz P 2000

Dieses Perfusions-Set ist für eine Vielzahl von 35er Petrischalen geeignet.

Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich eines Perfusions-Set für andere Petrischalen!